

North

unitron. Hearing matters



Produktportfolio 1.0



Es ist mehr als
eine Plattform


Es ist North

Basierend auf der bewährten Unitron Klangqualität, setzt die neue Unitron North Plattform neue Maßstäbe für absolut natürlichen Klang. Die perfekte Zusammenarbeit aus einem größeren Dynamikbereich, einer perfekten Signalverarbeitung und leistungsstarken Algorithmen bilden die Grundlage für die herausragende Klangqualität, die nur Unitron bietet.

Mit North erleben Ihre Kunden natürliches Hören wie noch nie.

101 dB Dynamik ist der größte Dynamikbereich in der Hörgeräteindustrie. Er macht noch mehr Signale hörbar – selbst die ganz hohen, ohne Verzerrungen. Musik klingt dadurch klar und voll.

Audiosignale werden aufgenommen und verarbeitet. Die Signaltreue bleibt während der gesamten Verarbeitung durchgängig erhalten und sorgt dafür, dass am Ende alles absolut natürlich klingt.

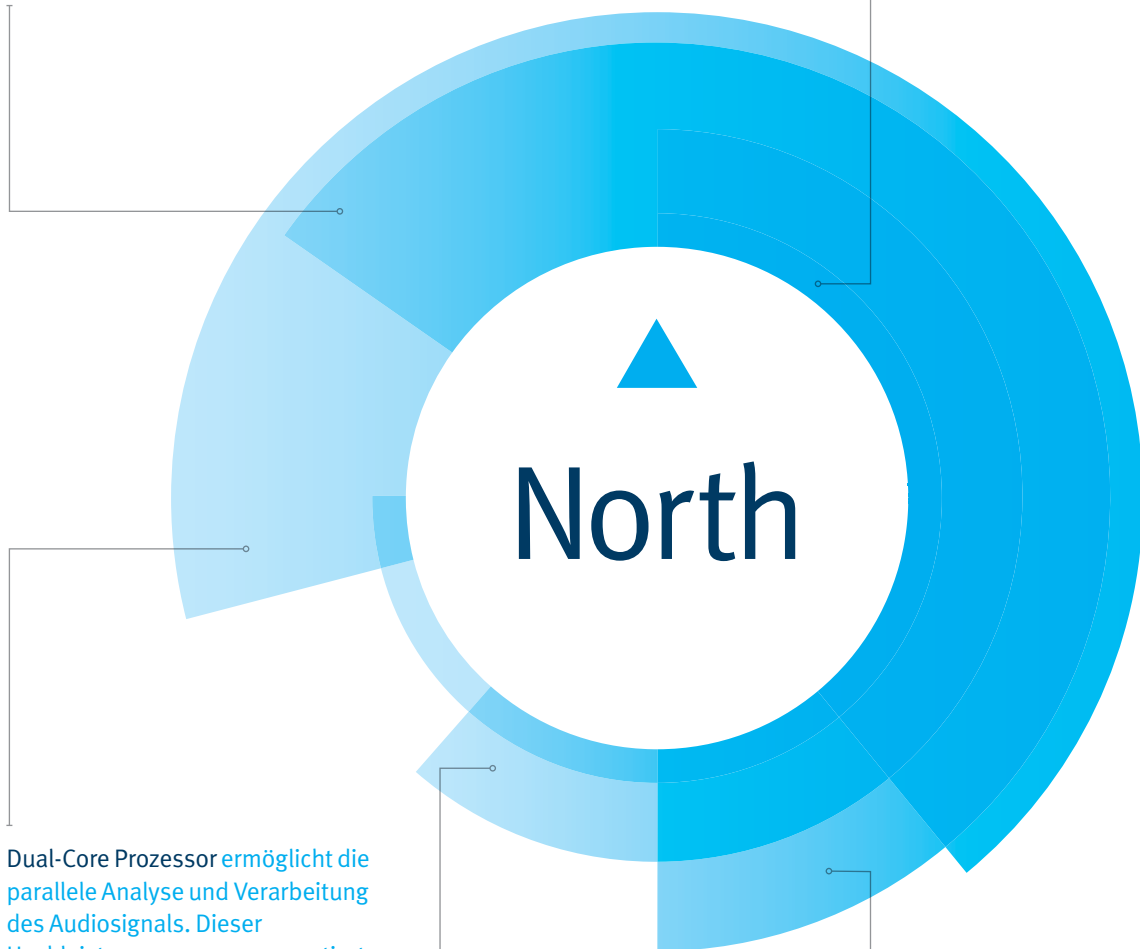

Dual-Core Prozessor ermöglicht die parallele Analyse und Verarbeitung des Audiosignals. Dieser Hochleistungsprozessor garantiert die modernsten Algorithmen in der Signalverarbeitungstechnologie.

2x die Speicherkapazität von Era™ ermöglicht Innovationen wie das neue Automatikprogramm SoundNav, das 7 unterschiedliche Umgebungen erkennt.

Die nahtlose Integration der Algorithmen in das System garantiert maximalen Nutzen, ohne die Klangqualität negativ zu beeinflussen.



Es ist eine völlig
neue Richtung

Gespräche werden in unterschiedlichen Umgebungen geführt

Jedes Gespräch hat seine eigene Geräuschkulisse. Aus diesem Grund erschien es uns nicht ausreichend, unseren Kunden nur ein Spracheim-Lärm Programm für alle Umgebungen anzubieten. Stattdessen sollten Hörsysteme verschiedene Umgebungen mit unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen automatisch erkennen und sich optimal an diese anpassen, so dass man an jedem Gespräch mühelos teilnehmen kann. Deshalb haben wir Technologien entwickelt, die unseren Kunden bestmögliches Hören in jeder Situation ermöglichen.

Ein absolut einzigartiger Ansatz, exklusiv von Unitron.




Fokus auf das Gespräch

Unser neues Automatikprogramm SoundNav garantiert eine noch präzisere Klassifizierung von sieben unterschiedlichen akustischen Umgebungen. Vier dieser Umgebungen legen den Schwerpunkt speziell auf Gesprächssituationen.



Hörkomfort bei optimaler Wahrnehmung

SoundNav erkennt zuverlässig, ob ein Gespräch stattfindet und ob es sich um eine laute oder ruhige Umgebung handelt. Wenn kein Gespräch erkannt wird, stellt Sound Conductor die Hörgeräteparameter auf bestmöglichen Hörkomfort und optimale Wahrnehmung ein.

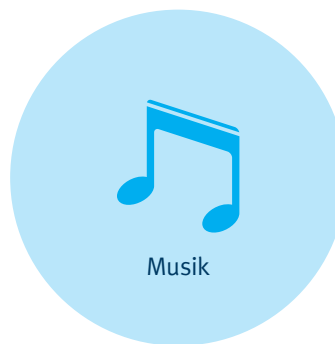

Musik genießen

SoundNav erkennt Musik und verarbeitet diese vollautomatisch binaural. Sound Conductor erhält die natürliche Klangqualität und verstärkt insbesondere die Stimmen.

Realer Fokus

Ihre Kunden möchten sich wieder mühelos unterhalten können. Wir machen das möglich.

Gesprächen folgen können


Leise Gespräche mit einem Gesprächspartner. Konversation in einer kleinen Gruppe. Sich in einem lauten Restaurant unterhalten, selbst wenn im Hintergrund ein Ventilatorgeräusch oder Verkehrslärm zu hören ist. Ihre Kunden möchten in einem Gespräch vor allem Eines können: verstehen, was gesprochen wird.

Das neue Automatikprogramm **SoundNav** ist so intelligent, dass es unterschiedliche Gesprächsumgebungen mit unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen zuverlässig erkennt und das Hörsystem individuell optimal anpasst.

Sound Conductor sorgt in einer Gesprächssituation für optimales Sprachverstehen. Sobald SoundNav eine Gesprächsumgebung mit spezifischen Hintergrundgeräuschen erkennt, passt Sound Conductor alle Hörsystemparameter präzise an diese an, so dass der Hörgeräteträger seine Gesprächspartner klar verstehen und mühelos am Gespräch teilnehmen kann.

Wenn das Gespräch in einer sehr lauten Umgebung stattfindet, wird die Premiumfunktion **SpeechZone™ 2** aktiviert. Es lokalisiert Sprache in einem 360° Radius präzise, um bestes Sprachverstehen zu ermöglichen, egal aus welcher Richtung die Sprache kommt.


Das perfekte Zusammenspiel von **SoundNav**, **Sound Conductor** und **SpeechZone 2** ermöglicht es Ihren Kunden in jeder noch so lauten Umgebung jeden Gesprächspartner klar und deutlich mit absolut natürlicher Klangqualität zu hören.

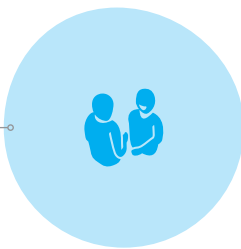


Gespräch in ruhiger Umgebung



Gespräch in kleiner Gruppe

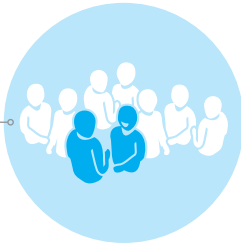

Gespräch in großen Gruppe

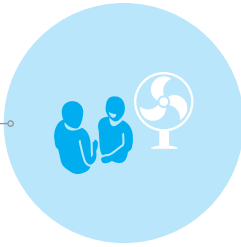

Gespräch im Störgeräusch


Herausragendes Hören setzt Teamarbeit voraus

Die Innovationen der North Plattform haben die Entwicklung von drei bahnbrechenden Technologien ermöglicht, die Ihren Kunden den natürlichen Klang bieten, den sie an Unitron lieben. Die starke Kombination dieser drei Technologien löst die Hauptbeschwerde von Hörgeräteträgern¹: Das Verstehen von Gesprächen.

SoundNav erkennt und unterscheidet sieben verschiedene Hörumgebungen und legt den Schwerpunkt auf unterschiedliche Arten von Gesprächen mit den jeweils zugehörigen Hintergrundgeräuschen.

Sound Conductor passt die Hörsystemparameter dynamisch an, um in der jeweils erkannten Situation bestmögliches Hören und natürlichen Klang zu ermöglichen.

SpeechZone™ 2 wird bei extremen Hintergrundgeräuschen vollautomatisch aktiv, so dass der Hörgeräteträger Sprache aus jeder Richtung klar verstehen kann.

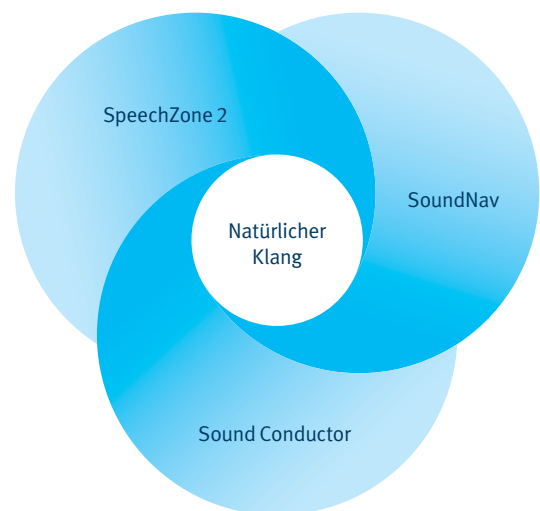

1. Kochkin S. MarkeTrak VIII: The key influencing factors in hearing aid purchase intent. Hearing Review. 2012; 19(3):12-25.



Moxi setzt auf North



Moxi™ hat Zuwachs bekommen und sah noch nie so gut aus. Es hat auch noch nie so gut geklungen. Das kommt daher, dass die neueste Generation der Moxi Hörsysteme auf der neuen North Plattform basiert. Moxi ist zudem weiterhin wegweisend in Sachen Design und bietet gleichzeitig eine Auswahl an drei RIC-Bauformen, so dass Sie alle Kundenwünsche erfüllen können.

Design, das attraktiv und ansprechend ist.
Klangqualität, die glücklich macht.

Das ist die neue Moxi Produktfamilie.



Moxi Kiss

Dieses preisgekrönte Hörsystemdesign arbeitet mit einer 312-er Batterie und besticht durch sein attraktives Gehäuse und seine vollautomatische Funktionsweise.



reddot award 2014
winner



product
design award

2014



Moxi Dura

Ein zuverlässiges und robustes Hörsystem mit 13-er Batterie mit hoher Batterielebensdauer


Alle Wünsche erfüllen

Eine hohe Spontanakzeptanz ist immer dann gegeben, wenn das Hörsystem natürlich klingt, einen hohen Tragekomfort garantiert und darüber hinaus auch noch so gut aussieht, dass man es jeden Tag gerne trägt. Seien Sie gespannt auf die Reaktion Ihrer Kunden auf Moxi. Diese RIC Produkte sind so verlockend, wie nie zuvor. Dank der Auswahl an drei unterschiedlichen Bauformen bietet es Ihnen alles, was Sie benötigen, um die Erwartungen Ihrer Kunden weit zu übertreffen.

Maximale Anpassflexibilität

Hörertyp:	Standard (xS)	Power (xP)	Super Power (xSP)	Super Power Plus (xSP Plus)
LAm _{ax.} / Vm _{ax.} (2cc)	113/47	127/57	131/63	134/67
Open Dome	•	•		
Closed Dome	•	•		
Power Dome	•	•		
Hohlotoplastik/Slim Tip	•	•		
cShell	•	•	•	•

Anpassbereiche:

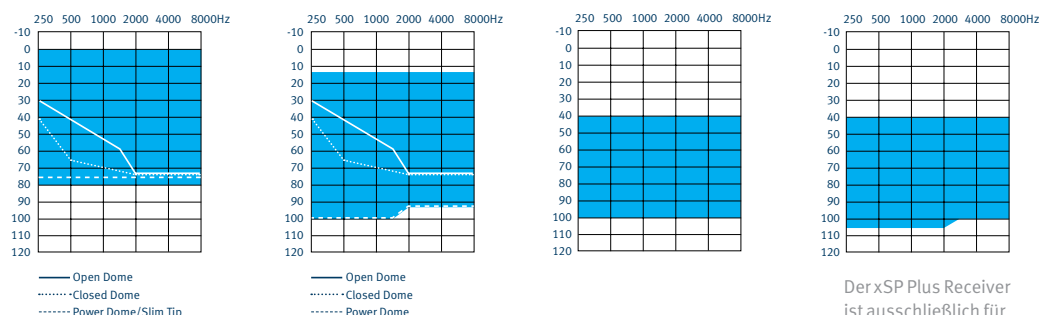

Der xSP Plus Receiver ist ausschließlich für Moxi Dura lieferbar



Blauer Bergsee (S7)



Sagenhafte Sahara (S6)



Prunkvolles Platin (P6)



Glänzender Granit (S5)



Seidiger Sternenstaub (P7)



Mystische Massai (S3)



Magisches Mahagoni (P4)



Zimt (Q9)



Lodernde Lava (P8)



Beige (01)



Brennender Bernstein (S2)



Bernstein (P2)

Macht das Leben leichter

Unsere 3 RIC Modelle sind in allen 5 Technologie-Ebenen verfügbar und besonders anwenderfreundlich:

- Einfach zu montierende Hörer
- Der Taster und die T-Spule in Moxi Fit und Moxi Dura garantieren Ihren Kunden eine größere Auswahl und mehr Regelmöglichkeiten
- Deutlich sichtbare Farbmarkierungen
- Leicht zugängliche Programmierbuchsen für einfache und schnelle Verbindung



Das neue Moxi Fit

Bei Moxi Kiss und Moxi Dura wurde die Technik aufgefrischt, Moxi Fit ist sowohl innen wie außen neu. Es bietet Ihren Kunden die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität mit 312-er Batterie, einem Taster und einer T-Spule.

Zubehör für natürlichen Klang

Der absolut natürliche Klang unserer Moxi Hörsysteme wird durch eine breite Palette an praktischem Zubehör ergänzt. Alle Zubehörgeräte sind mit dem neuen Energie-effizienten wireless Chip der North Plattform kompatibel und sind einfach und intuitiv zu bedienen.



Remote



Streamer/Fernbedienungen



Remote Control 2

Diese Fernbedienung ermöglicht es Ihren Kunden, die Lautstärke und die Programme ihres Hörsystems diskret und einfach zu verändern, um in jeder Situation bestmöglich zu hören.

Die Anwendungsbereiche?
Überall

uStream (Neu)

Die Hörgeräteträger genießen Stereoklang durch noch einfachere, diskretere Anbindung an wireless Geräte.

Die Anwendungsbereiche?
Mobiltelefone, TV und Bluetooth® MP3-Player

uDirect™ 3

Die Hörgeräteträger genießen direkte Ankopplung an alle Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte - Klang in Stereoqualität und maximale Batterielebensdauer inklusive.

Die Anwendungsbereiche?
Mobiltelefone, TV, FM-Empfänger und Bluetooth® MP3-Player

Macht das Leben leichter

Zubehörlösungen sind weitere Hilfsmittel, um die Effektivität von Hörsystemen in vielen Situationen zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.



Weiteres Zubehör, das einen Streamer erfordert

App

uMic™

Die Hörgeräteträger können eine einzelne Signalquelle in einer schwierigen Umgebung noch klarer hören.

Die Anwendungsbereiche?

Vorträge, Präsentationen, Restaurant, im Auto

uTV™ 3

Die Audiosignale des Fernsehers werden an beide Hörsysteme gesendet - für angenehmes und entspanntes Fernsehen.

Die Anwendungsbereiche?

Beim Fernsehen

uControl™ (Neu)

Kunden können Programme und Lautstärke über eine App auf ihrem Smartphone oder Tablet kontrollieren - immer und überall.

Die Anwendungsbereiche?

Überall





Macht das Leben leichter

Die Unitron TrueFit Software bietet mehr als eine normale Anpassoftware.

Mithilfe der Unitron TrueFit Kundenbildschirme können Sie Ihre Kunden stärker in den Anpassprozess einbinden.

Log It All erfasst und zeigt die Hörerfahrungen des Kunden in allen sieben Umgebungen an. Anhand dieser Aufzeichnungen können Sie Ihren Kunden die Vorteile unterschiedlicher Technologie-Ebenen besser erklären.

Anpassungen, die zufrieden stellen

Wir haben versprochen, die Anpasssoftware nicht kompliziert zu gestalten und dieses Versprechen halten wir auch. Unsere Kunden bestätigen uns immer wieder, dass die **Unitron TrueFit™ Software** sehr leicht zu erlernen und intuitiv anwendbar ist. Mit der frischen neuen Oberfläche vereinfacht Unitron TrueFit jeden einzelnen Anpassschritt und bietet Ihnen eine weitere Möglichkeit das Vertrauen Ihrer Kunden aufzubauen.

iCube II garantiert schnelle, wireless Anpassungen, damit Ihre Kunden noch schneller in den Genuss Ihrer Hörsysteme kommen.





84% der Flex-Kunden glauben, dass Flex die Kundenzufriedenheit steigert

83% der Flex-Kunden berichten, dass Flex zu mehr Hörgeräteverkäufen führt

82% der Flex-Kunden berichten, dass mithilfe von Flex:trial mehr hochwertigere Technologie-Ebenen angepasst werden

Quelle: Unitron Studie vom März 2014, durchgeführt Anovum, Befragung von 97 Flex-Kunden in Kanada, Australien und Deutschland.

Flex stärkt Ihren Erfolg

Flex™ ist einzigartig in der Branche. Flex gibt Ihren Kunden die Möglichkeit, ein Hörsystem oder eine höhere Technologie-Ebene völlig risikofrei zu Hause zu testen, es steigert das Vertrauen in Sie und sorgt für lang anhaltende Loyalität Ihrer Kunden.

Flex:trial

Flex:trial ist ein Test-Hörsystem, das Sie beliebig oft in unterschiedliche Technologie-Ebenen umprogrammieren können. Ihre Kunden werden von dieser Möglichkeit des risikofreien Probetragens begeistert sein. Flex:trial verringert den Kaufdruck, sowie die Angst und die Unsicherheit, die Kunden vor dem Kauf eines Hörsystems haben können.

Mit dem neuen Flex:tracker integrieren Sie jetzt Flex:trial noch einfacher in Ihre Geschäftsabläufe. Und mit der Unitron TrueFit Software organisieren Sie Ihren Flex:trial Bestand einfach und schnell.

Flex:upgrade

Mit Flex:upgrade können Sie die Hörsysteme Ihrer Kunden auf jede beliebige hochwertigere Technologie-Ebene upgraden. Dank der Unitron TrueFit Software können Sie im Fachgeschäft ganz einfach ein Upgrade durchführen. Dies ist ein einzigartiger Ansatz, um optimal auf die sich verändernden Bedürfnisse Ihrer Kunden einzugehen. Gleichzeitig vermitteln Sie Ihnen die Gewissheit auch in Zukunft flexibel zu sein.

Log It All bereichert Flex

Log It All ist eine Beratungsfunktion in der Unitron TrueFit Software. Es wertet die Verwendung des Hörsystems in 7 verschiedenen Umgebungen aus, um eine evidenzbasierte Empfehlung für die optimale Technologie-Ebene zu ermöglichen.

Glückliche Kunden
Maximaler Erfolg

Wir bieten Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihren Kunden eine optimale Erfahrung zu ermöglichen. Das war schon immer so. Dieses Ziel ist Teil unseres umfassenden Engagements, das Hörsysteme attraktiver macht und letztlich Ihren Geschäftserfolg steigert.

Unsere Produktphilosophie basiert auf der Devise, Hörlösungen zu entwickeln, die die echten Probleme von Menschen mit Hörverlust lösen. Dies wird an unserer neuen, leistungsstarken North Plattform deutlich, die die Entwicklung neuer Technologien ermöglicht hat, die früher undenkbar waren. Und unsere einzigartige Flex Geschäftslösung sorgt für echte Kundenzufriedenheit und Loyalität. All dies trägt dazu bei, ein positives Erlebnis zu garantieren, das Ihre Kunden glücklich macht, auch lange nachdem sie Ihr Geschäft verlassen haben. Denn nichts führt so sicher zum Geschäftserfolg wie zufriedene Kunden.

Moxi im Überblick

Kanäle

Hauptfunktionen

SpeechZone 2

Glossar

Aktiviert die optimale Mikrofonstrategie, um auch unter schwierigsten akustischen Bedingungen Sprache aus allen Richtungen optimal fokussieren zu können

Binaurale räumliche Signalverarbeitung

Die Hörsysteme arbeiten zusammen, um Sprache zu fokussieren

SoundNav

Automatikprogramm, das unterschiedliche akustische Umgebungen identifiziert und die Hörsysteme anpasst, mit dem Fokus auf unterschiedliche Arten von Gesprächen

Sound Conductor

Dynamische Balance der Hörsystemparameter, um bestmögliches Sprachverstehen und maximalen Komfort bei absolut natürlichem Klang zu garantieren

MyMusic

Maximaler Musikgenuss durch ein individuell konfiguriertes Musikprogramm

Binaurales Telefon

Streamt Audiosignale vom Telefonohr zum Gegenohr, ohne dass dazu ein Zubehörgerät notwendig ist

Automatischer Anpass-Manager

Führt neuversorgte Hörgeräteträger intelligent und nicht wahrnehmbar von einer Anpassung mit maximaler Spontanakzeptanz zu den Verstärkungswerten, die für langfristig optimales Sprachverstehen benötigt werden

Funktionen

Adaptiv directional

Richtmikrofonstrategie, die mehrere Störgeräuschquellen erkennt und unterdrückt

Pinna Effekt

Bildet die natürliche Akustik der Ohrmuschel nach und sorgt so für mehr natürliche Direktionalität

Frequenzkompression

Komprimiert und verschiebt nicht hörbare hohe Frequenzanteile hin zu hörbaren tieffrequenteren Bereichen

AntiShock

Reduziert unangenehm laute Signale, ohne Sprache negativ zu beeinflussen

Allen Technologie-Ebenen gemeinsam:

- Log It All
- Natural Sound Balance
- Data Logging
- Rückkopplungsmanager
- Windmanager
- Tinnitus Masker
- Manuelle Programme
- Streaming Programme
- DuoLink*
- Easy-t
- Easy-DAI**
- IntelliVent-Technologie für alle Arten von Otoplastiken
- Plasmabeschichtung
- IP67 für Moxi Dura
- IP57 für Moxi Kiss und Moxi Fit
- T-Spule*
- WDRC Signalverarbeitung mit NAL-NL1, NAL-NL2 und DSL v5
- Lineare Signalverarbeitung mit DSL v5

*Für Moxi Fit und Moxi Dura verfügbar **Für Moxi Dura verfügbar

Pro	800	700	600	500
20	20	16	10	6
SpeechZone 2	SpeechZone			
•	•			
7 Umgebungen	6 Umgebungen	5 Umgebungen	2 Umgebungen	AutoMic
•	•	•	•	•
Autom. binaural synchronisiert	Autom. binaural synchronisiert	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•



Wir bei Unitron engagieren uns sehr für Menschen mit Hörverlust. Wir arbeiten eng mit Hörgeräteakustikern zusammen, um Hörlösungen von realem Nutzen anbieten zu können.
Because hearing matters.

unitron.com/de